


FlexCath Advance®

STEROWANA KOSZULKA
12 F

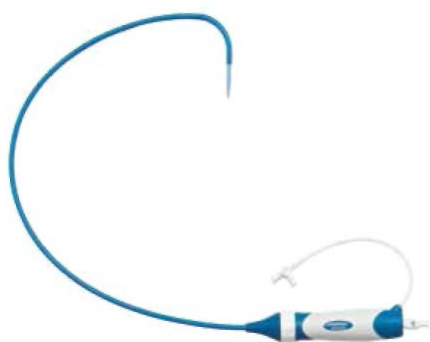


SPECYFIKACJA WYROBU

FlexCath Advance jest to introduktor cewnikowy wprowadzany przezskórnie, wyposażony w zawór, który umożliwia wprowadzanie, usuwanie oraz wymianę cewnika oraz przewodnika, jednocześnie zapobiegając dostawianiu się powietrza oraz ograniczając utratę krwi. Maksymalny kąt odchylenia, przy zastosowaniu kriobalonu i wprowadzonego cewnika mapującego Achieve® lub przewodnika, wynosi 135 stopni.

Informacje dotyczące zamówienia

Numer zamówienia	
4FC12	FlexCath Advance 12 F
Parametry koszulki	
Rozmiar	
Średnica wewnętrzna koszulki (ŚW)	12 F
Średnica zewnętrzna koszulki (ŚZ)	15 F
Długość całkowita	81 cm
Długość użytkowa	65 cm
Znacznik nieprzepuszczalny dla promieni RTG	5 mm od dystalnej końcówki koszulki
Odchylenie koszulki i zasięg cewnika	
Maksymalny kąt odchylenia	135°
Zasięg	5,5 cm przy 90°
Zgodność	
Zgodność cewnika	Do 10,5 F
Zgodność przewodnika	,032" do ,035"
Materiał	
Trzon	Biokompatybilny kopolimer (Pebax®) z dodatkiem siarczanu baru (BaSO ₄)
Rozszerzacz	
Długość całkowita	87 cm
Materiał	Biokompatybilny polietylen o niskiej gęstości (LDPE) z dodatkiem siarczanu baru (BaSO ₄)

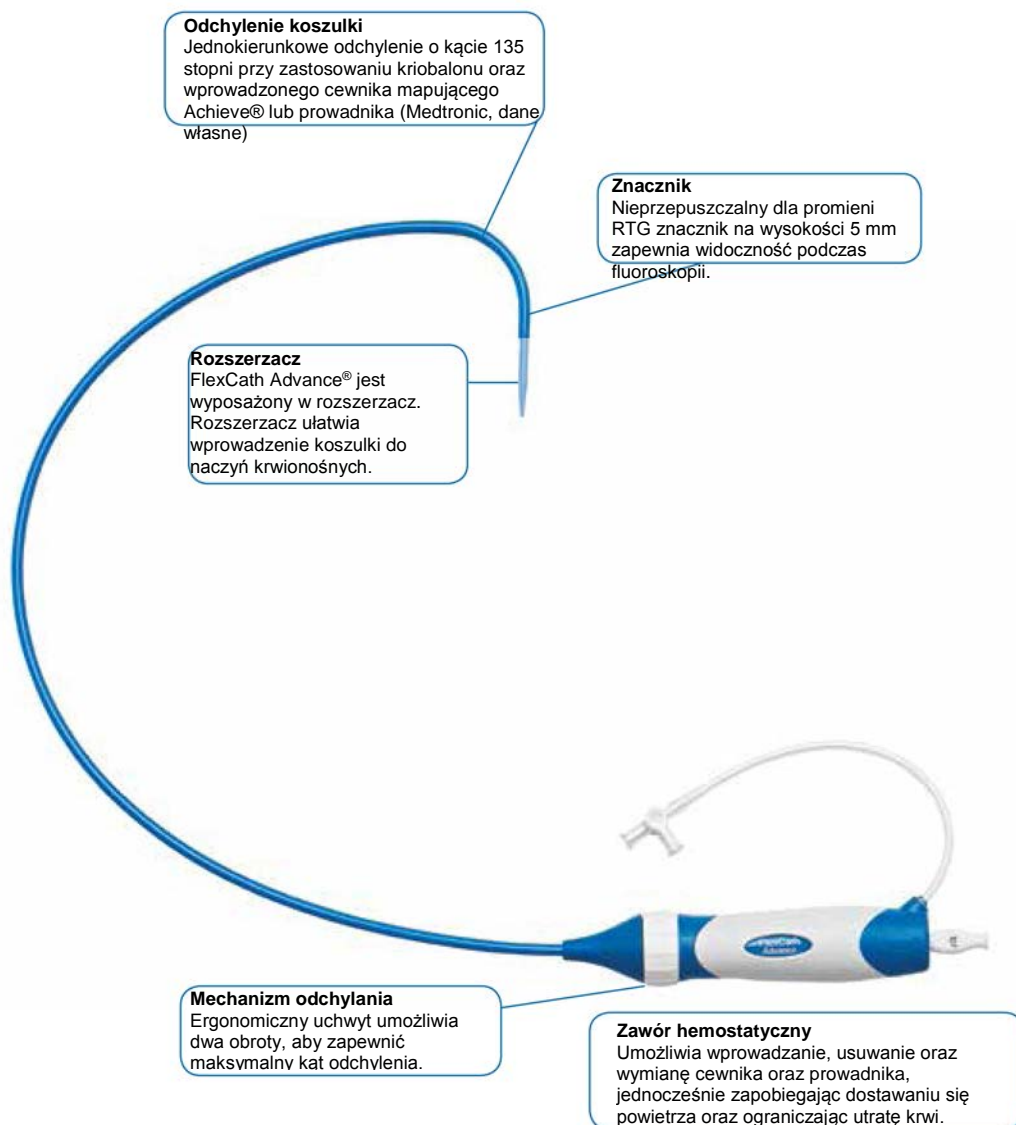

Krótki opis

Wskazania do stosowania

Sterowana koszulka FlexCath Advance jest przeznaczona do wprowadzania cewnika przez skórę do naczyń krwionośnych oraz komór serca. Odchylenie koszulki ułatwia ustawienie cewnika.

Przeciwwskazania

Sterowana koszulka FlexCath Advance nie powinna być umieszczana w lewym przedsionku lub komorze, jeśli:

- pacjent ma łatę w przegrodzie międzykomorowej lub przeprowadzono u niego inną operację w okolicy przegrody międzykomorowej,
- u pacjenta wystąpiło zdarzenie zatorowe z lewej strony serca w ciągu dwóch miesięcy przed zabiegiem,
- u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się obecność śluzaka przedsionka,
- koszulki FlexCath Advance nie należy stosować do wykonywania nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz potencjalnych powikłań/zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

www.medtronic.eu

Europa

Medtronic International Trading Sarl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel.: +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Wielka Brytania/Irlandia

Medtronic Limited
Building 9
Croxley Green Business Park
Hatters Lane
Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel.: +44 (0)1923 212213
Faks: +44 (0)1923 241004