

B. Braun Regionalna Anestezja: Znieczulenia zewnątrzoponowe



B. Braun Znieczulenie zewnątrzoponowe

Wysoka jakość w Twoich doświadczonych rękach.


Igły zewnątrzoponowe B. Braun

Ze względu na często występujące różnice anatomiczne pomiędzy pacjentami, ważny jest właściwy dobór odpowiednich igieł do znieczuleń zewnątrzoponowych.


Korzystając z igieł firmy B.Braun użytkownik jest pewien precyzji wykonania i niezawodności ich działania.

Igła typu Tuohy

- Unikalne wygięcie i kształt szlif: Znakomite wyczucie i rozróżnienie poszczególnych warstw tkanek
- Najwyższa jakość wykonania szlif: Stała odpowiedź tkankowa w każdej procedurze
- Gładkie wewnętrzne krawędzie szlif: Minimalizacja ryzyka uszkodzenia cewnika

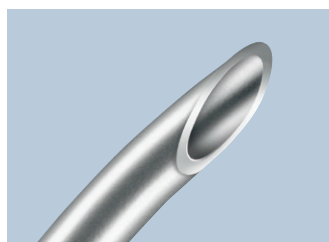

Gładkie wewnętrzne krawędzie szlif minimalizują ryzyko uszkodzenia cewnika

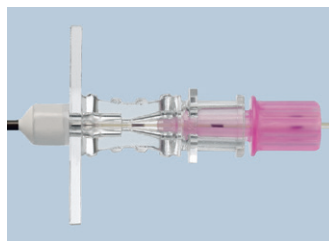

Element wprowadzający znajdujący się na cewniku dokładnie dopasowany do uchwytu igły



Korzyści dla użytkownika – bezpieczeństwo procedury

- Unikalne wygięcie i kształt szlif igły zapewnia uzyskanie znakomitej odpowiedzi tkankowej i rozróżnienie poszczególnych warstw tkanek
- Duża odporność na zginanie – znakomite prowadzenie igły w tkankach
- Pełny zakres rozmiarów dla dzieci i dorosłych dla wszystkich procedur

Bezpieczne wsunięcie cewnika do igły za pomocą elementu wprowadzającego



Cewniki Perifix® są bardzo wysoko oceniane na świecie

Rosnące użycie cewników zewnątrzoponowych w wielu zestawach do znieczuleń, analgezji i leczeniu bólu wymaga specyficznych cech i różnorodności w zależności od zastosowania.

Cewniki Perifix® wykonane są w unikalnej formule, poliamid nie zawiera plastifikatorów i lateksu, posiada bardzo wysoką biokompatybilność.

Korzyści dla użytkownika – bezpieczeństwo procedury

- Cewniki Perifix® Standard i Soft Tip
 - znakomita stabilność i odporność na zaginanie przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na łatwe wprowadzenie i usunięcie cewnika
 - wysoka przezroczystość cewnika dla lepszej wizualizacji płynów
- Cewniki Perifix® Soft Tip posiada dodatkowo cechy:
 - elastyczna i atraumatyczna końcówka cewnika
 - redukuje ryzyko perforacji
- Perifix® ONE
 - wysoki odsetek powodzeń i mało komplikacji, łatwy i bezpieczny do założenia
 - znakomite rozprzestrzenianie się leku
 - kolor cewnika wyklucza możliwość pomyłek – element bezpieczeństwa

Cewniki :

Perifix® ONE Paed i Perifix ONE (1)

Perifix® Standard z zamkniętym końcem i 3 otworami bocznymi (2)

Wysoco elastyczny koniec cewnika i standardowa sztywność z 3 otworami bocznymi: Perifix® Soft Tip (3)

Skala 20:1

Perifix® – najbardziej kompleksowa oferta cewników zewnątrzoponowych

Łatwe wprowadzenie cewnika wymaga relatywnie sztywnego cewnika dla łatwego wprowadzenia do przestrzeni zewnątrzoponowej : Perifix® Standard.

Z drugiej strony miękki cewnik sprawia większe problemy z wprowadzeniem i usunięciem.

Idealny cewnik zewnątrzoponowy jest połączeniem sztywności i elastyczności z bardzo miękką, atraumatyczną końcówką cewnika: Perifix® Soft Tip.

Obecnie idealna sztywność dla wprowadzanego cewnika oraz pożądana miękkość dla umieszczenia cewnika wewnątrz ciała łączą się w żółtym cewniku z nową końcówką i 3 parami laserowo wyciętych mikro otworów: Perifix® ONE.

Wysoco elastyczny i odporny na załamania poliamidowy cewnik redukuje powstawanie okluzji



B. Braun Znieczulenie zewnątrzoponowe

Innowacyjna linia – Perifix®

Strzykawka do metody spadku oporu (LOR)

Czytelna identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej nie wymaga tylko umiejętności i doświadczenia po stronie anestezjologów, ale również wysokiej dokładności strzykawek LOR.

Strzykawka Perifix® LOR przeznaczona jest do techniki spadku oporu zarówno z zastosowaniem powietrza jak i soli fizjologicznej. Wszystkie strzykawki Perifix® LOR nie zawierają lateksu.

Poprawne wykonanie techniki LOR wymaga dobrego dopasowania igły Tuohy do strzykawki.

Korzyści dla użytkownika

- Łatwość przesuwu tłoka dzięki znakomitym cechom ślizgowym
- Paraboliczna skala na strzykawce zapobiega pomyleniu jej ze standardową strzykawką
- Nie zawiera lateksu



Filtr Perifix® z PinPad

W znieczuleniu zewnątrzoponowym filtry stanowią dodatkowy stopień bezpieczeństwa i ochrony przed infekcjami bakteryjnymi. Minimalna powierzchnia zalegania zapewnia właściwe dawkowanie. Filtry posiadają wysoką odporność ciśnieniową do 7 bar, zapewnia to bezpieczeństwo podczas ręcznej iniekcji leków. Zastosowanie elementu mocującego filtr do skóry – Perifix® PinPad oszczędza czas. Samoklejący, nie zawierający lateksu i hipoalergiczny podkład piankowy może być umocowany szybko na skórę, ułatwiając zachowanie higieny i zapewniając komfort.

Korzyści dla użytkownika

- Filtr Perifix® z PinPad
 - zwiększa komfort i higienę pacjenta
 - łatwe mocowanie, oszczędność czasu
- Łącznik Perifix®
 - bezpieczne i pewne mocowanie cewnika
 - łatwy w użyciu, ergonomiczny kształt
 - czytelne potwierdzenie pozycji zamknięty/otwarty



Perifix® System mocowania cewnika do skóry

System mocowania cewnika do skóry zapewnia łatwość mocowania i zwiększa bezpieczeństwo.

Po zamocowaniu zmiana położenia cewnika jest niemożliwa.

Kontrolę miejsca punkcji można przeprowadzić bez ryzyka zmiany położenia cewnika. Płaski kształt elementów mocujących cewnik zapewnia wygodę dla pacjenta.

Korzyści dla użytkownika

- Element mocujący cewnik:
 - zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie uniemożliwiające ruch cewnika
- Opatrunek:
 - zapewnia komfortową ochronę miejsca wkłucia
 - może być łatwo wymieniany bez ryzyka zmiany położenia cewnika



Element mocujący cewnik



Opatrunek

Łatwa kontrola miejsca punkcji dzięki półprzezroczystemu opatrunkowi








Płaski kształt zapewnia wysoki komfort pacjentowi



Zestawy B. Braun do znieczuleń zewnątrzoponowych







Zastosowanie wyrobu: Znieczulenie zewnątrzoponowe to procedura blokady centralnej stosowana w chirurgii, położnictwie oraz w leczeniu bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe (łędźwiowe, piersiowe, szyjne) w celu szybkiego i niezawodnego znieczulenia w trakcie operacji. W razie konieczności znieczulenie można rozszerzyć i wydłużyć w trakcie trwania operacji. Zniesienie czucia bólu jest możliwe w dowolnym momencie po operacji.

Specyfikacja

Perican® igła zewnątrzoponowa typu Tuohy ■ 20 G ø 0.9 mm / Długość 50 mm ■ 18 G ø 1.3 mm / Długość 80 mm ■ 18 G ø 1.3 mm / Długość 50 mm (zestaw pediatryczny) □ 16 G ø 1.7 mm / Długość 80 mm										
	Perican® igła zewnątrzoponowa typu Tuohy		Perifix® Cewnik zewnątrzoponowy ONE, 6 otworów			Perifix® Cewnik zewnątrzoponowy, 3 otwory		Otwór na końcu	3 otwory boczne	Perifix® LOR – strzykawka do metody spadku oporu,
	50 / 80 mm 120 mm		24 G 20 G 19 G	20 G 19 G		20 G		20 G		

Pełne zestawy	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE			Perifix® Standard			Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 420	■				●				
	Perifix® 421	■				●				●
	Perifix® 430	□					●			
	Perifix® 431	□					●			●
	Perifix® 620	■						●		
Perifix® z cewnikiem z miękką końcówką	Perifix® 900	■							●	
	Perifix® 901	■							●	●
Perifix® z cewnikiem ONE	Perifix® ONE420	■		●						
	Perifix® ONE421	■		●						●
	Perifix® ONE430	□			●					
	Perifix® ONE431	□			●					●
Zestawy z filtrem	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE			Perifix® Standard			Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 400	■				●				
	Perifix® 401	■				●				●
	Perifix® 402	□					●			●
	Perifix® 405	□					●			
	Perifix® 451	■				●				●
Perifix® z cewnikiem z miękką końcówką	Perifix® 700	■							●	
	Perifix® 701	■							●	●
	Perifix® 730	□							●	●
	Perifix® 750	■							●	●
Perifix® z cewnikiem ONE	Perifix® ONE400	■		●						
	Perifix® ONE401	■		●						●
	Perifix® ONE402	□			●					●
	Perifix® ONE405	□			●					
	Perifix® ONE418		■	●						●
	Perifix® ONE451	■		●						●
Zestawy pediatryczne z filtrem	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE			Perifix® Standard			Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® ONE Paed	Perifix® ONE Paed 18	■		●						●
	Perifix® ONE Paed 20	■	●							●
Zestawy ze standardowym cewnikiem	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE			Perifix® Standard			Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 100	■						●		
	Perifix® 300	■				●				
	Perifix® 301	■				●				●
	Perifix® 302	□					●			●
	Perifix® 310	□					●			

średnica cewników wyrażona w gauge (G) zgodnie z norma EN ISO 9626

						* Sterican® igły 25G Długość 16 mm, ø 0.5 mm 21G Długość 40 mm, ø 0.8 mm 18G Długość 40 mm, ø 1.2 mm
Omnifix® 3-częściowa strzykawka 3ml, Luer-Lock	Omnifix® Omnifix 3-częściowa strzykawka 3ml, 20ml, Luer-Lock, 3 igły iniekcyjne*	Omnifix® Omnifix 3-częściowa strzykawka 3ml, 10ml, 20ml, Luer-Lock, 3 igły iniekcyjne*	Perifix® filtr zewnętrzny 0,2 µm, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar	Perifix® mocowanie filtra do skóry	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	

Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
						10	4514203
						10	4514211
						10	4514300
						10	4514319
						10	4516206
						10	4510291
						10	4510305
						10	4514203C
						10	4514211C
						10	4514300C
						10	4514319C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
						20	4514009
						20	4514017
						20	4514025
						20	4514050
						20	4514513
						20	4510216
						20	4510097
						20	4517309
						20	4517504
						20	4514009C
						20	4514017C
						20	4514025C
						20	4514050C
						10	4514183C
						20	4514513C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
						10	4512006C
						10	4512014C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
						20	4511000
						20	4513002
						20	4513010
						20	4513029
						20	4513100

