

OSTRY DOSTĘP NACZYNIOWY

Zestawy cewników MAHURKAR™ Elite

- Termoczuły materiał poliuretanowy zapewnia optymalną sztywność podczas wprowadzania, a po wprowadzeniu mięknie.
- Radiocieniujące, poliuretanowe trzon i końcówka zapewniają szybką wizualizację.
- Konstrukcja kanału Double-D™ zapewnia maksymalne zwiększenie wewnętrznej średnicy cewnika bez osłabienia wytrzymałości jego ścianek.
- Duże, wycinane laserowo boczne szczeliny biegną wokół trzonu cewnika, zapewniając większy otwarty obszar przepływu płynu i zmniejszając ryzyko okluzji przy ściance naczyń.
- Miękka, atraumatyczna końcówka w kolorze zielonym ma konstrukcję zmniejszającą ryzyko spowodowania urazu naczyń podczas wprowadzania oraz in situ.
- Wytrzymałe adaptery z materiału Ultem™ są odporne na pęknięcia.
- **Zawartość sterylna:**

(1) cewnik	(1) rozszerzadło tkankowe, 12 Fr (tylko cewniki w rozmiarze 12 Fr i 12,5 Fr)
(1) igła wprowadzająca 18G	(1) rozszerzadło tkankowe, 14 Fr (tylko cewnik w rozmiarze 13,5 Fr)
(1) prowadnik J/prosty 0,035 cala × 70 cm z suwakami	(2) opatrunki wyspaw Telfa™
(1) zdejmowane skrzydełko do zakładania szwów (tylko wstępnie zakrzywione cewniki)	(2) nasadki uszczelniające (3 szt. dostarczane z cewnikiem w rozmiarze 12,5 Fr)
(1) rozszerzadło tkankowe, 10 Fr	



MAHURKAR™ Elite 12 Fr

Zestawy cewników dwukanałowych z prostymi ramionami


KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888221213	13	1,2	1,2	5
8888221216	16	1,3	1,3	5
8888221220	20	1,4	1,4	5
8888221224	24	1,5	1,5	5
8888221230	30	1,8	1,8	5



MAHURKAR™ Elite 12 Fr

Zestawy cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888222213	13	1,2	1,2	5
8888222216	16	1,3	1,3	5
8888222220	20	1,4	1,4	5
8888222224	24	1,5	1,5	5

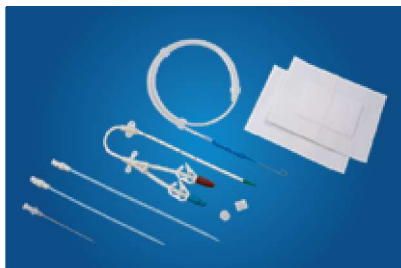

MAHURKAR™ Elite 12 Fr

Zestawy cewników dwukanałowych ze wstępnie zakrzywionym trzonem

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888223213	13	1,5	1,5	5
8888223216	16	1,6	1,6	5
8888223220	20	1,7	1,7	5



MAHURKAR™ Elite 13,5 Fr

Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z prostymi ramionami

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888211213	13	1,3	1,3	5
8888211216	16	1,4	1,4	5
8888211220	20	1,6	1,6	5
8888211224	24	1,7	1,7	5
8888211230	30	2,0	2,0	5



MAHURKAR™ Elite 13,5 Fr

Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888212213	13	1,3	1,3	5
8888212216	16	1,4	1,4	5
8888212220	20	1,6	1,6	5
8888212224	24	1,7	1,7	5



MAHURKAR™ Elite 13,5 Fr

Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych ze wstępnie zakrzywionym trzonem

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888213213	13	1,6	1,6	5
8888213216	16	1,7	1,7	5
8888213220	20	1,9	1,9	5



MAHURKAR™ Elite 12,5 Fr
Zestawy cewników trójkanałowych z prostymi ramionami

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888231213	13	1,2	1,2	5
8888231216	16	1,3	1,3	5
8888231220	20	1,4	1,4	5
8888231224	24	1,5	1,5	5
8888231230	30	1,8	1,8	5



MAHURKAR™ Elite 12,5 Fr
Zestawy cewników trójkanałowych z zakrzywionymi ramionami

KOD	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII TĘTNICZEJ (ml)	OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA LINII ŻYLNEJ (ml)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
8888233213	13	1,2	1,2	5
8888233216	16	1,3	1,3	5
8888233220	20	1,4	1,4	5
8888233224	24	1,5	1,5	5