



## **Cewnik urologiczny typ Foley**

### **Instrukcja użytkowania**

**1. Nazwa:**

Cewnik urologiczny typ Foley

**2. Rozmiary:**

2-drożny: Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22, Fr24, Fr26;

3-drożny: Fr16, Fr18, Fr20, Fr22, Fr24, Fr26

**3. Przeznaczenie:**

Ten wyrób służy do drenażu moczu i/lub zanieczyszczeń.

**4. Instrukcja obsługi:**

1. Upewnij się, że cewnik jest dobrze nasmarowany, a następnie przepuść opróżniony cewnik przez cewkę moczową do pęcherza. Cewnik otwarty można wprowadzić na dobrze nasmarowaną prowadnicę drutu, aby ułatwić zakładanie.
2. Użyj strzykawki do napełnienia balonu. Zaleca się sprawdzanie objętości płynu balonu, a następnie ponowne napełnianie zalecaną objętością.
3. Ujście cewnika można połączyć z workiem do zbiórki moczu.
4. W przypadku stosowania trójdrożnego cewnika Foleya do irygacji można użyć trzeciego odprowadzenia.
5. Zapewnij dobry drenaż z cewnika.
6. Przymocuj cewnik do skóry.
7. Wypełniaj w razie potrzeby.

**5. Ostrzeżenia:**

Ten wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku urologicznego.

Nie używaj maści ani smarów na bazie ropy naftowej, ponieważ mogą one uszkodzić silikon i pęknąć balony.

W wyniku nadmiernego nacisku do nadmuchania balonu może pęknąć balonu.

Po użyciu ten produkt może stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne. Utylizacja zgodnie z przyjętą praktyką medyczną oraz obowiązującymi lokalnymi, stanowymi i państwowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

**6. Usuwanie cewnika**

1. Odłącz wszystkie rurki drenażowe/irygacyjne od cewnika.
2. Opróżnij balon Foleya.
3. Usuń cewnik

**7. Wskazówki**

Dostarczany sterylizowany gazowym tlenkiem etylenu w otwartych opakowaniach.


Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylne, jeśli opakowanie jest nieotwarte lub nieuszkodzone. Nie używaj produktu, jeśli istnieją wątpliwości, czy produkt jest sterylny.

Przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu bez dostępu światła. Po wyjęciu z opakowania sprawdź produkt, aby upewnić się, że nie doszło do uszkodzenia.

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd.



Moonlight Road, Medical Device Technology Park, Jinxian,  
Nanchang, Jiangxi 331700, China

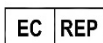

Name: MedPathGmbH

Add: Mies-van-derRohe-Strasse80807 MunichGermany

Tel:+49(0)89189174474 Fax:+49(0)8954858884